

HIX  
Microscope

ヒックスマイクロスコープ

## 取扱説明書

HIX



本製品はAGA※管理アプリ「HIX」と接続し、  
頭皮・毛髪状態の測定の際に使用します。  
ご使用前にアプリをダウンロードしてください。

※男性型脱毛症



HIX 公式サイト

# ⚠ 安全上のご注意 ⚠

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**⚠ 警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**⚠ 注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

## ⚠ 警告

- マイクロスコープの充電に付属品以外のケーブルやアダプタ機器を使用しないでください
- マイクロスコープを分解や加工、加圧、加熱しないでください
- マイクロスコープを水などの液体や火の中に入れたりしないでください
- マイクロスコープを炎天下など、高温になるところに放置しないでください
- 乳幼児の手の届くところに置かないでください
- 異常・故障時※には直ちに使用を中止してください  
※煙ができる。異常ににおいや音がする。内部や水に異物が入った。  
触れないくらい熱い。破損している。
- USBケーブルは正しく使ってください※  
※加工しない。傷つけない。熱器具に近づけない。差し込みがゆるい電源コンセントには使わない。ぬれ手で抜き差ししない。  
ほこりをためない。根元まで確実に差し込む。
- バッテリーの液もれが起こったら、HIX公式サイトからご相談ください
- 可燃性・爆発性・引火性のガスなどのある場所で使わないでください

## ⚠ 安全上のご注意 ⚠

### ⚠ 注意



● LED ライトの光を至近距離で直視しない



● LED ライトを長時間さわらない



● レンズを太陽や強い光源に向けたままにしない



● 油煙や湯気の当たる場所に放置しない



● 湿気やほこりの多い場所に放置しない

# About HIX Microscope

ヒックスマイクロスコープ



薄毛の進行は遅らせるためには、  
より早い段階からの適切な対策が重要です。  
しかし日常の生活の中で、  
初期段階の進行を正しく把握することは  
とても難しいのが現実です。  
HIX Microscopeは、  
**“自分の髪や頭皮の状態を把握したい”**  
不安や悩みを抱える方の、  
そのような想いを受けて開発しました。



# COMMITMENT

## 自分の頭皮や髪の状態が分かる


HIXアプリに接続し、マイクロスコープで髪と頭皮を撮影・判定することで、肉眼では分かりにい頭皮や毛髪※の状態を知ることができます。

※髪の毛の太さや密度(毛穴あたりの毛の本数)




## 自宅などで手軽にできる

「時間がない」「通院に抵抗がある」などの理由で、クリニックや専門施設に行かない方でも、HIX Microscopeがあれば、ご自宅などで本格的な頭皮や薄毛の状態判定ができます。

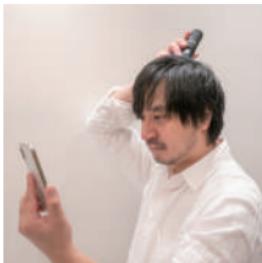

## 各部の名前

### ● マイクロスコープ本体

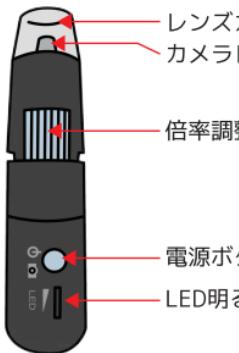

レンズカバー  
カメラレンズ(撮影部位)

倍率調整ダイヤル

電源ボタン

LED明るさ調整ダイヤル



充電ポート

### ● 顕微鏡スタンド

### ● USBケーブル



充電するときに使用します。



マイクロスコープを立てた状態で  
保管するためのものです。

## 充電方法

### ■ マイクロスコープを使用する前に充電します。

- 1.マイクロスコープと AC/USB 変換アダプタをUSB ケーブルでつなぎ  
プラグを家庭用コンセントに差し込みます。
- 2.充電が開始されると充電ランプが赤く点灯します。  
充電が完了すると充電ランプが消灯します。
- 3.充電が切れかかるとバッテリーランプが赤く点灯します。  
※バッテリー電圧が下がると正常動作が保証できませんので再充電を行ってください。

## 使い方


### 1.アプリとマイクロスコープの接続方法

1-1

マイクロスコープの電源ボタンを長押しして、  
電源を入れます。

マイクロスコープのライトが  
光っていることが確認できます。

「電源 3 秒間長押し」

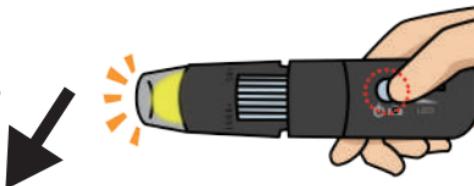

1-2

スマートフォンのWi-Fiネットワーク設定画面にて、  
「Max-see\_」から始まるネットワークを選択してください。



1-3

「Wi-Fi接続が完了しました」という  
下記の画面があらわれたら、接続完了です。

## 2.マイクロスコープを使った頭皮の撮影方法

### 2-1 襟足の撮影

- マイクロスコープの先端部分を  
襟足に対して垂直に充ててください。
- 髪の毛はかきわけるようにして、  
毛穴と頭皮が写るようにしてください。



### 2-2 生え際の撮影

- マイクロスコープの先端を左右どちらかの  
生え際の内側(髪の毛が生えている部分)  
に垂直に充ててください。
- 髪の毛はかきわけるようにして、  
毛穴と頭皮が写るようにしてください。



### 2-3 頭頂部の撮影

- マイクロスコープの先端をつむじの周辺部分に  
垂直にあててください。
- 髪の毛はかきわけるようにして、  
毛穴と頭皮が写るようにしてください。






- ・倍率調整ダイヤルを回して、ピンとを合わせてください。  
　　ピントがずれている場合、正しく判定されない可能性があります。

### 撮影の OK / NG例

OK

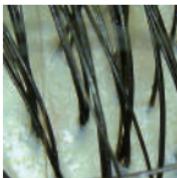


髪と毛穴が両方  
はっきり見える

NG



毛穴が見えにくい

NG

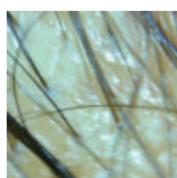

ピントが合ってない

### 3.画像のアップロード

撮影が終わりましたら、アプリのガイドにそって  
「質問票」に進んでいただくと撮影終了です

## 無料修理規定

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で  
保証期間内に故障した場合には、無料で修理・交換します。
2. 保証期間内に故障して修理・交換をお受けになる場合には、  
HIX Storeにお問い合わせください。  
**store@hix-selfcheck.com**
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - ・ 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ・ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
  - ・ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - ・ 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
  - ・ 保証書の提示がない場合。
  - ・ 保証書にお買い上げ年月日、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※ 保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※ 個人情報は、HIX公式サイト <https://hix-selfcheck.com/> に掲載されている「プライバシーポリシー」に基づき適切に管理いたします。

## < HIX Microscope 保証書 >

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料の修理・交換を行うことを約束するものです。お買い上げ日から下記期間中に故障が生じた場合は、HIX Storeにお問い合わせください。

品名	HIX Microscope
保証期間	お買い上げ日より1年
対象部分	マイクロスコープ本体
お買い上げ日	年      月      日
販売店	

★保証書は再発行しませんので、大切に保管してください

★ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。必ず記入捺印してお客様へお渡しください。

★製品の使用方法や修理に関するお問い合わせ

**store@hix-selfcheck.com**



Fulfilling your life

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」(2~3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

**株式会社エムボックス**

---

〒103-0028 東京都中央区八重洲1-8-17 新横町ビル6F